

機械器具(01) 手術台及び診療台


一般医療機器 汎用診断・処置用テーブル 13958009

アトム診療ユニット EU-20N

【 警 告 】
●点灯中および消灯直後は、照明灯に手を触れないこと。(Eライト LED 付のみ) [火傷の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

1.各部の名称

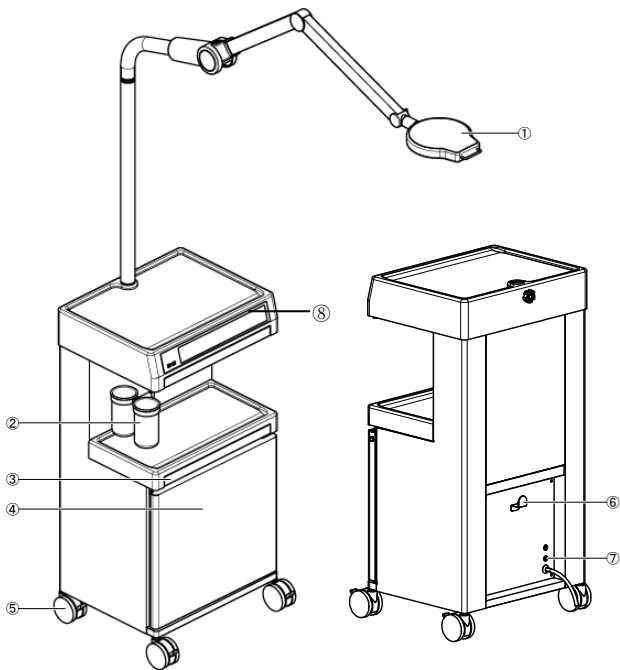

番号	名 称	番号	名 称
①	E ライト LED※	⑤	キャスター
②	鉗子立・嘴管差	⑥	コード掛
③	引出し	⑦	ブレーカ
④	扉	⑧	電源表示灯

※E ライト LED 付でない製品をお買い上げの際は、含まれておりません。

2. 寸法・重量

- (1) 寸法:幅 47 奥行 37.5 高 95cm (E ライト LED 付は 182cm)
(2) 重量／本体:約 28kg E ライト LED:約 4.7kg

3. 機器の分類

- (1) 電撃に対する保護の形式: クラス I 機器
(2) 電撃に対する保護の程度: B 形装着部

4. 電氣的定格

- (1) 定 格 電 圧 : AC100 V±10%
(2) 周 波 数 : 50/60 Hz
(3) 電 源 入 力 : E ライト LED 付 30 VA

5. 原理

本品は、テーブル、引き出し、鉗子立・嘴管差、および照明灯などで構成され、診察室、あるいは手術室などで使用される。
E ライト LED の点灯・消灯は、ライト本体のメインスイッチ及び非接触センサで操作することができる。

【使用目的、効能又は効果】

本品は診断、処置のために用いる一般用テーブルである。本品は、テーブル、引き出し、鉗子立・嘴管差、および照明灯などで構成され、診察室、あるいは手術室などで使用される。

【品目仕様等】

製品仕様

- (1)E ライト LED
ランプ : 発光ダイオード
照 度 : 約 30,000 lx 以上 (距離 80 cm にて)
光 野 : 約 φ 90 cm (距離 80 cm にて)
(2)許容荷重
テ ー ブ ル : 6 kg
引 出 し : 2 kg

【操作方法または使用方法等】

1. 使用環境条件

- (1) 温度:10～40℃
(2) 湿度:30～75% (結露しないこと)
(3) 気圧:70～106kPa

2. 操作方法 ※詳細は取扱説明書を参照してください。

- (1) 電源プラグを電源コンセントに接続します。
(2) E ライト LED の点灯・消灯は、ライト本体のメインスイッチ及び非接触センサで操作します。

【使用上の注意】 ※詳細は取扱説明書を参照してください。

- (1) 本器の設置は、確実にキャスターをロックして固定してください。
[転倒や移動などして、破損やけがの原因になります。]
(2) 本器の動作電圧範囲(AC100V±10%)外では使用しないでください。
(3) 電源コンセントの位置は、本器の近くで電源コードに人が触れない位置を選び、機器 1 台ごとに専用のコンセントを用いてください。
また、アースを確実にとるために、電源コードは正しくアースされた 3 芯接地型コンセントだけに接続してください。
(4) 絶対に延長コードを使用しないでください。
(5) 本器が正常に動作しないときは、すぐに使用を中止してください。
(6) 本器を布などで覆った状態で使用しないでください。
[過熱して火災や感電の原因になります。]
(7) 分解や改造をしないでください。
[火災や感電、けがの原因になります。]
(8) E ライト LED の取付けの際は、必ず診療ユニットの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
(9) E ライト LED を診療ユニットに取り付けた際には、必ず固定ネジで支柱を固定してください。
(10) 清拭や消毒の際には、診療ユニットの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
(11) E ライト LED を布などで覆った状態で使用しないでください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(12) 清拭・消毒を行うときは、電源プラグを抜き E ライト LED の温度が十分に下がってから行ってください。

【貯蔵・保管及び使用期間等】

1. 保管条件

周囲温度:0～60℃

相対湿度:10～85% (結露しないこと)

気 圧:70～106kPa

2. 耐用期間

本器の耐用期間は 6 年です。[自己認証データによる]

【保守・点検に係る事項】

本器を安全に、より長い間ご使用いただくために、取扱説明書の第 6 章の記載に従って、保守点検を実施してください。保守点検には「使用前の点検」があります。また、定期的に交換が必要な部品があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661 (大代表) FAX:048-853-0304 (代表)

■製造業者

アトムメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-18-15

TEL:03-3815-2311 (大代表) FAX:03-3812-3144 (代表)